

HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND


The fast and painless system for non-surgical lifting of the face and neck and for body firming.

ULTRASUONI FOCALIZZATI AD ALTISSIMA INTENSITA'

Il sistema veloce ed indolore per lifting non chirurgico di viso e collo e per il rassodamento del corpo.



HIFU Sculpture 5

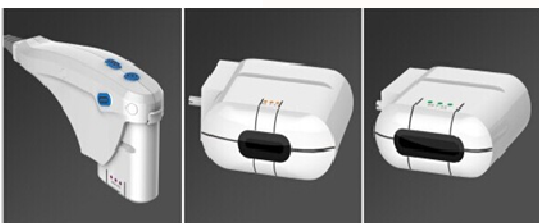

HIFU SCUPLPTURE 5 è un apparecchiatura di nuova generazione che attraverso l'utilizzo di Ultrasuoni Focalizzati ad Alta Intensità trasmette direttamente alla pelle ed al tessuto sottocutaneo un' energia termica che può stimolare e rinnovare il collagene e di conseguenza migliorare la consistenza della pelle riducendone i cedimenti. Oltre all'effetto termico sulle fibre di collagene si otterrà una stimolazione fino sulla fascia di ancoraggio tra pelle e muscolo (SMAS) con risultati sovrapponibili ad interventi di lifting più invasivi.

Le principali indicazioni sono:

- Rimuovere le rughe dalla fronte e dal contorno occhi
- Sollevare e rassodare le guance
- Innalzare l'arcata sopracciliare
- Rimuovere e prevenire le rughe del collo
- Migliorare l'elasticità della pelle rassodando la cute del viso e del corpo

Grazie alla visione ecografica dello strumento si possono eseguire trattamenti personalizzati ad ogni tipo di tessuto , inoltre grazie alle 5 testine in dotazione (1,5 mm- 3,0 mm-4,5 mm-8,0 mm-13,0 mm) si possono trattare, a diverse profondità e con differenti frequenze, sia il viso che il corpo.


CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
ALIMENTAZIONE	230V—50/60 Hz	MAIN SUPPLY
POTENZA ASSORBITA	300 W	ABSORBED POWER
PESO (kg)	10 kg	WEIGHT (kg)
DIMENSIONI	49x48x35	DIMENSIONS
TECNOLOGIA	HIFU Ultrasuoni Focalizzati ad Alta Intensità HIFU High Intensity Focused Ultrasound	TECHNOLOGY
NUMERO TESTINE	5+2	NUMBER OF HEADS
NUMERO COLPI/TESTINA	10.000	NUMBER Of SHOT/HEAD
TIPO DI ENERGIA	HIFU 4MHz - 7MHz	ENERGY TYPE
ENERGIA	0,1-3 J/cm ² (0,1-2,5J 13mm) Step 0,1mm	ENERGY OUTPUT
DISTANZA FRA I PUNTI TERMICI	1-4 mm (step 0,2mm)	DISTANCE
LUNGHEZZA	5-25 mm (step 1,0mm)	LENGH
PROFONDITA'	1,5 -3,0 - 4,5 - 8,0 - 13,0 mm	DEPTH

HIFU SCULPTURE 5 is a new-generation equipment that through the use of **High Intensity Focused Ultrasound** delivers directly to the skin and the subcutaneous tissue a thermal energy which can stimulate and renew the skin's collagen and thus consequently improving the texture, reducing sagging of the skin. Besides the thermal effect on the collagen fibre it will produce a stimulation to the fat layer and to the anchor strip between the skin and muscle (SMAS) with results comparable to more invasive face-lifting procedures.

The main indications are:

- Remove wrinkles around forehead and eyes
- Lift and tighten the cheek
- Uplift the eyebrow line
- Removal wrinkle and prevent neck from aging
- Improve skin elasticity, tightening the skin of the face

Thanks to ultrasound view of this tool you can perform customized treatments for all types of tissue, also by means of the 5 heads provided (1,5 mm- 3.0 mm-4.5 mm-8,0 mm-13,0 mm) we can treat, at different depths and different frequencies, both face and body.

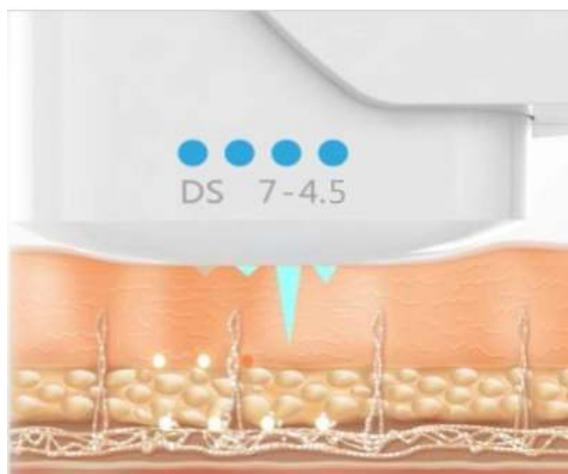

TecnoLaser

Via Venezia 173 - 43122 Parma - ITALY
 Tel. +39 0521 271102
 Fax +39 0521 272846
 e-mail: tecnolaser@tin.it

www.tecnolaser.net / www.tecnolaser.de /
www.technolaser.eu / www.tecnolasereuropa.info /
www.tecnogamma.info / www.applegreen.net
www.applegreen.it / www.applegreen.eu