

*Radiofrequency devices for resistive and capacitive beauty diathermy treatments, for anti-ageing treatments and to fight cellulite blemish also with active principles vehiculation.*

*Apparecchi a radiofrequenza per trattamenti a diatermia estetica di tipo resistivo e capacitivo per trattamenti anti-ageing, per combattere gli inestetismi della cellulite ed anche per veicolazione di prodotti.*



**RadioPhor Desy**

**RadioPhor Plus**

# RADIOPHOR



**RADIOPHOR** is a microprocessor controlled device for emission of RF waves, with no risk and side effect, by preset doses and frequencies related with the treated areas (face-decolletè and body).

**RADIOPHOR** utilizes the RF emission biostimulating effect on the physiological cellular mechanism to obtain a lasting face rejuvenation, minimizing the wrinkles and the skin laxity; can be utilized also for the anti aging treatment and post acne scars.

**RADIOPHOR** is also a suitable treatment to fight cellulite and fat blemishes, with remarkable effects also in the field of toning up and body reshaping.

The model **RADIOPHOR PLUS/DESY** besides radiofrequency is supplied also with an electrophoresis vehiculator that allows, by ionization of the substances (water or gel ,not oil, based ) the transmission of active principles.



The equipments are equipped with two different size of ergonomic handpieces for face and body. On request are available also other resistive and capacitive handpieces models like bipolar, tripolar in different size.

**RADIOPHOR** è un dispositivo controllato a microprocessore per un emissione di RF in assoluta sicurezza, da usare per il trattamento del viso, décolleté e corpo. **RADIOPHOR** sfrutta l'effetto dell'emissione RF sui meccanismi cellulari fisiologici per ottenere un duraturo ringiovanimento del viso, attenuando le rughe e la lassità cutanea; può essere utilizzato per i trattamenti anti ageing e nelle cicatrici post-acne.

**RADIOPHOR** è anche il trattamento ideale per combattere gli inestetismi della cellulite e adipe, con effetti notevoli anche nel campo della tonificazione e del rimodellamento corporeo.

La versione **RADIOPHOR PLUS/DESY** oltre alla radiofrequenza è dotata anche di un veicolatore ad elettroporazione che tramite la ionizzazione dei prodotti idonei ,a base di acqua(gel) e non oleosi, agevola la loro penetrazione. Le apparecchiature dispongono di due manipoli ergonomici di misura diversa per viso e corpo. Su richiesta sono disponibili anche altri manipoli resistivi e capacitivi come bipolare, tripolare di misure diverse.

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL SPECIFICATIONS
ALIMENTAZIONE	230V—50/60 Hz	MAIN SUPPLY
POTENZA ASSORBITA	120 VA	ABSORBED POWER
PESO (kg)	6 kg	WEIGHT (kg)
FREQUENZA DI USCITA	520kHz(resistive) / 630kHz (capacitive)	FREQUENCY
POTENZA EMESSA	20W (resistive) / 50W (capacitive)	OUT POWER
RAFFREDDAMENTO	Forced air system	COOLING SYSTEM
CLASSIFICAZIONE	I tipo BF (CEI 62-39)	CLASSIFICATION
CONTROLLO ELETTRONICA	Microprocessore—Microprocessor	ELECTRONC CONTROL

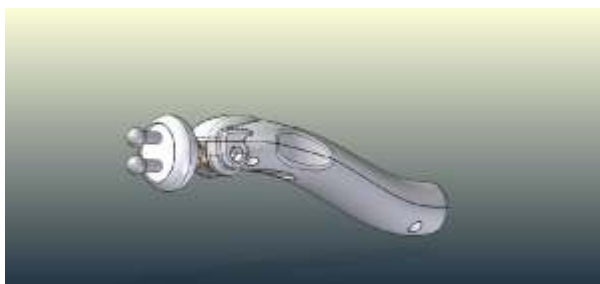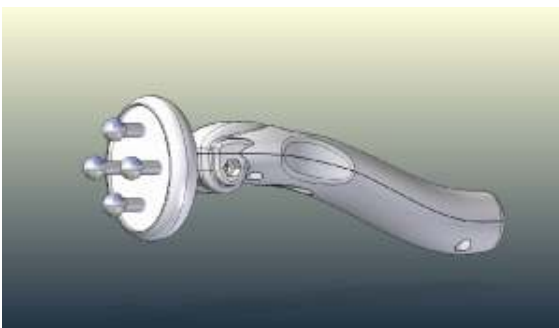

**TecnoLaser**

Via Venezia 173 - 43122 Parma - ITALY

Tel. +39 0521 271102

Fax +39 0521 272846

e-mail: [tecnolsr@tin.it](mailto:tecnolsr@tin.it)

[www.tecnolaser.net](http://www.tecnolaser.net) / [www.tecnolaser.de/](http://www.tecnolaser.de/)

[www.technolaser.eu/](http://www.technolaser.eu/) [www.tecnolasereuropa.info/](http://www.tecnolasereuropa.info/)

[www.tecnogamma.info/](http://www.tecnogamma.info/) [www.applegreen.net](http://www.applegreen.net)

[www.applegreen.it/](http://www.applegreen.it/) [www.applegreen.eu](http://www.applegreen.eu)